




lisa
signolux

Trådlös dörrklockaknapp

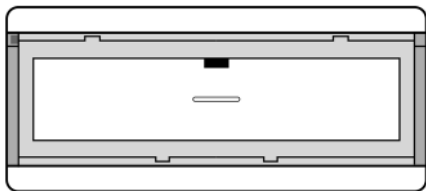

SV

Bruksanvisning

Trådlös dörrklockaknapp

REF A-2657-W

Lisa-Signolux »Trådlös dörrklockaknapp« hjälper personer med hörselnedsättning att kompensera för sitt funktionshinder. Den gör det möjligt att uppfatta ljudsignaler i bostaden genom synliga signaler.

»Trådlös dörrklockaknapp« ingår i ett medicinskt system och är kompatibel med alla enheter i *Lisa-Signolux* trådlösa system.

Förpackningens innehåll

Kontrollera att alla nedanstående delar ingår:

- Trådlös dörrklockaknapp
- Batteri (CR2032, redan isatt i enheten)
- Klebeband
- Bruksanvisning
- Garantikort

Om förpackningen eller förpackningsförseglingen (rund transparent etikett) är skadad ska du kontrollera delarnas skick. Om delar saknas eller är skadade, vänd dig till din återförsäljare eller direkt till tillverkaren.



Viktiga säkerhetsanvisningar

- Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och i sin helhet innan du tar enheten i bruk. Följ noga de övriga varningarna och säkerhetsanvisningarna på sidorna 11 och 12.
- Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe så att den alltid är tillgänglig för andra användare. Varje huvudanvändare måste ha tillgång till den.
- Håll *Lisa-Signolux*-enheter utom räckhåll för barn! Förpackningen innehåller små delar – det finns risk för att de sväljs och därmed kvävningsrisk!

- Ljusblixtarna från mottagarenheterna kan utlösa epileptiska anfall hos personer med ljuskänslig epilepsi (PSE).

Funktionsprincip

En *Lisa-Signolux*-signalanläggning består av minst en sändare (t.ex. en dörrklocka) och en mottagare.

När t.ex. dörrklockan trycks in sänds en radiosignal till *Lisa-Signolux*-mottagaren. Beroende på mottagartyp visar denna händelsen genom ljussignaler, ljud eller vibrationer.

Idrifttagning

Batteriet är redan isatt vid leverans. Efter att skumremsan (transportsäkring) under den genomskinliga fronten har tagits bort är knappen omedelbart klar för användning.

Automatisk sändarigenkänning

Lisa-Signolux-enheter kan användas tillsammans direkt vid leverans utan föregående programmering.

Dörrklockaknappen visas då på mottagarenheterna med händelsesymbolen "Dörrklocka 2".



Viktig anmärkning 1:

Sändaren kan visas på mottagarenheterna enligt egna önskemål. Detta kan göras genom den programmeringsprocedur som beskrivs nedan: "Individuell registrering av sändaren på mottagarna".

Detta medför dock att mottagaren förlorar den förinställda sändarigenkänningen och att alla sändare inom anläggningen måste kopplas om en och en.

Viktig anmärkning 2:

Om upprepade felaktiga utlösningar inträffar vid användning av den förinställda sändarigenkänningen kan detta tyda på att det finns en närliggande Lisa-Signolux-anläggning.

I detta fall kan störningarna åtgärdas genom individuell koppling av alla sändare och mottagare inom anläggningen (se nedan "Individuell registrering av sändaren hos mottagarna").

Individuell registrering av sändaren hos mottagarna

Dörrklockans knapp kan visas på Lisa-Signolux-mottagarna med en egenvalen händelsesymbol.

Håll för detta ändamål funktionsknappen på respektive mottagare intryckt i några sekunder. Mottagarens symboler tänds en efter en.

Släpp knappen så snart önskad symbol lyser.

Tryck nu på knappen på dörrklockan.


Vänta ca 20 sekunder och testa sedan funktionen genom att trycka på dörrklockan igen.

Upp till 8 olika sändare kan registreras på en mottagarsymbol.

Byte av batteri

För att kunna sätta i knappcellsbatteriet (typ CR2032) måste du först öppna batterifacket.

a) Placera dörrklockans tryckknapp på en arbetsyta så att de två vridaxlarna på den genomskinliga fronten (fig. 1 A och C) är vända bakåt.

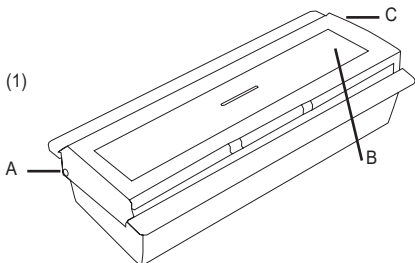


b) Tryck nu försiktigt på den lilla stiftet på vänster sida med ett spetsigt föremål (t.ex. en kulspetspenna) (fig. 1 A).

c) Nu bör den genomskinliga plastfronten till vänster (fig. 1 A) kunna skjutas upp och sedan tas bort.

d) Nu kan du skruva loss skruven (fig. 1 B) med en liten stjärnskruvmejsel och ta bort framsidan av dörrklockan, bakom vilken kretskortet med batteriet sitter.

e) Nu har du tillgång till batteriet.

f) Om du vill byta batteri tar du bort det gamla från plasthållaren (fig. 2 D) med hjälp av en liten platt skruvmejsel genom att försiktigt lyfta i hörnet (fig. 2 E). Därefter kan du sätta i ett nytt batteri. Se till att batteriets polaritet är korrekt.

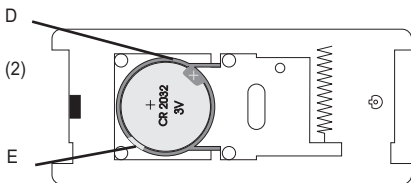

Märk namnskylden och sätt in den

a) Om du ännu inte har öppnat höljet, följ anvisningarna i punkt 1 a) till c).

b) Den genomskinliga plastfronten består av två delar. Mellan dessa kan du skjuta in den märkta namnskylden (mått: 94x24 mm). Se till att texten är rättvänd så att du kan läsa den. Se också till att namnskylden har en utskärning som inte täcker lysdioden eller åtminstone släpper igenom ljuset.

c) Sätt ihop de två genomskinliga delarna av plastfronten igen så att utskärningarna passar ihop.

d) För att sätta ihop dörrklockaknappen, se nästa kapitel.

Montering av dörrklockknappen

- a) Om du endast har bytt ut namnskylten, gå vidare till punkt e).
- b) Se till att den lilla skruven (fig. 1 B) kan greppa på rätt ställe. Vrid vid behov en av höljesdelarna 180°.
- c) Sätt in framsidan i dörrklockans hölje och tryck försiktigt ihop båda delarna tills höljesdelarna klickar fast. Se till att den insatta gummipackningen sitter korrekt.
- d) Skruva försiktigt in den lilla skruven (fig. 1 B) med en liten stjärnskruvmejsel.
- e) Håll nu dörrklockknappen så att den lilla skruven (fig. 1 B) befinner sig till höger.
- f) På höger sida av knappen finns en liten öppning (fig. 1 C) där gångjärnsstiftet på den genomskinliga plastfronten kan hängas in.
- g) Nu kan du sätta på den genomskinliga plastfronten tills den nästan har nått sitt slutläge. Du behöver bara trycka in den lilla stiftet (fig. 1 A) försiktigt och låta den genomskinliga plastfronten klicka på plats.

Montering av dörrklockknappen

Du kan fästa dörrklockan med den medföljande dubbelhäftande tejp. Se till att underlaget är slätt, torrt och rent.

Viktig information:

Observera att metalledar och andra byggmaterial kan påverka radiosignalens räckvidd. Enheten är skyddad mot damm och stänkvatten (IP 54). Vid montering utomhus bör enheten ändå placeras under ett tak för att skyddas.



För din säkerhet: För att säkerställa att systemet fungerar korrekt måste ett funktionstest utföras efter installationen. Om rökdetektorer är integrerade i systemet är det ett lagkrav att regelbundet kontrollera rökdetektorerna och deras larmsignaler!

Tekniska data

 Driftområde:	10 till 30 °C, optimal omgivnings- temperatur: 25°C
 Luftfuktighet:	<90%, nicht kondensierend (Transport, Lagerung und Betrieb)
Skyddsklass:	IP 54
Radiofrekvens:	868,425 MHz
Räckvidd:	upp till 200 m (öppet område)
Sändningseffekt:	<10 mW
Batteri:	CR2032 (3V)
El. säkerhet:	Lågspänningsenhet
Standby-tid:	18 månader / batteri (vid 5 aktiveringar per dag)
Mått (HxBxD):	41 x 90 x 23 mm
Vikt:	41 g

Förväntad livslängd för enheten: ca 10 år

Varnings- och säkerhetsanvisningar

I detta kapitel anges ytterligare viktig information om säker hantering samt övriga driftsvillkor.



Säkerhetsanvisningar för batterier

- Använd endast den angivna batteritypen CR2032! Det finns risk för explosion om fel batterityp används.
- Batterierna får inte utsättas för extremt höga eller låga temperaturer eller lågt lufttryck under användning, förvaring eller transport på hög höjd.
Om batterierna kastas i eld, ugnar eller krossas eller skärs sönder mekaniskt kan det leda till brand eller explosion. Om du utsätter batterierna för extremt höga temperaturer kan det leda till explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Batterier som utsätts för extremt lågt lufttryck kan explodera eller avge brandfarliga vätskor eller gaser.
- Ta bort batteriet från enheten om den inte ska användas under en längre tid (> 3 månader).
- Om batterinivån är för låg kan systemets händelsemeddelanden missas!
- Batterier är giftiga och får inte sväljas! Förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur. I nödfall måste lämplig medicinsk hjälp omedelbart sökas.



Säkerhetsinformation om produkten

Vänligen följ dessa anvisningar för att undvika skador på enheten och eventuellt upphävande av garantin.

- Enheten är avsedd för användning i bostadsmiljöer. Enheten får inte utsättas för direkt solljus under längre tid och måste dessutom skyddas mot stark värme, fukt inuti enheten eller kraftiga mekaniska stötar.
- Låt inte enheten falla. Om enheten faller på ett hårt underlag kan den skadas eller gå sönder.

Underhåll och rengöring

Enheten är underhållsfri. Vid smuts kan den rengöras med en mjuk, fuktad trasa. Använd vid behov endast vanliga desinfektionsmedel på alkoholbasis.

Använd aldrig rengörings- eller desinfektionsmedel som innehåller aceton eller väteperoxid, samt blekande, frätande eller slipande medel. Ingen vätska eller fukt får tränga in i enhetens öppningar.

Garanti

Enheten har hög driftsäkerhet. Om fel uppstår trots korrekt användning, vänligen kontakta din återförsäljare eller vänd dig direkt till tillverkaren. Garantin omfattar kostnadsfri reparation eller utbyte samt kostnadsfri returfrakt.

Vi rekommenderar att du returnerar produkten i originalförpackningen, så kasta inte bort den under garantitiden.

Garantin upphör att gälla vid skador som orsakats av felaktig hantering eller reparationsförsök av icke auktoriserade personer (förstöring av enhetens sigill).

Garantiåtgärder utförs endast om den ifyllda garantikortet och en kopia av fakturan/kvittot från återförsäljaren skickas in.

Serienumret måste alltid anges.



Avfallshantering av uttjänta elektriska och elektroniska apparater (gäller i EU-länderna och andra europeiska länder med ett separat insamlingssystem för dessa apparater).

Symbolen på produkten eller dess förpackning anger att denna produkt inte ska behandlas som vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas in till en insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att bidra till korrekt avfallshantering av denna produkt skyddar du miljön och dina medmänniskors hälsa. Miljön och hälsan äventyras vid felaktig avfallshantering.

Materialåtervinning bidrar till att minska förbrukningen av råvaror.

Mer information om återvinning av denna produkt kan du få från din kommun, de kommunala avfallsföretagen eller den butik där du köpte produkten.



Avfallshantering av batterier

Det medföljande batteriet är återvinningsbart. Vänligen lämna in batterierna i en batteribehållare eller hos en återförsäljare. Lämna endast in urladdade batterier för att skydda miljön.

Kompatibla **Lisa-Signolux**-mottagare:

Enheten är kompatibel med alla mottagare i *Lisa-Signolux*-serien:

- Mottagare S (A-2616-W)
- Mottagare T (A-2617-0)
- Mobil vibrationsmottagare (A-2619-0)
- Mottagare med väckarklocka (A-2634-0 / W)
- Blinklampa (A-2644-W)
- Blinklampa med Schuko-uttag (A-2645-0)
- Armbandsmottagare (A-2646-0)
- Mottagare T Connect (A-2676-0)

Märkning

MD Märkning från Humantechnik GmbH för en medicinteknisk produkt enligt EU 2017/745.

UDI Angivelse av produktidentifikationsnumret för den medicintekniska produkten.

SN Angivelse av serienumret för identifiering av den medicintekniska produkten. Detta anges på enheten och förpackningen.

REF Angivelse av tillverkarens artikelnummer.



Angivelse av tillverkaren av den medicintekniska produkten.



Märkning av tillverkningsdatum för den medicinska produkten.



Denna symbol anger viktiga varningar för användaren samt viktig information om användning och driftsäkerhet.



Temperaturintervall vid transport och förvaring: -5 °C till 40 °C



Denna symbol anger att användaren bör läsa denna bruksanvisning noggrant.



Denna symbol anger viktiga varningar för användaren samt viktig information om användning och driftsäkerhet.



Temperaturintervall vid transport och förvaring: -5 °C till 40 °C
Temperaturintervall vid drift: 10 °C till 30 °C,
optimal omgivningstemperatur: 25 °C



Luftfuktighet vid transport och förvaring: < 90 % (icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid drift: 15 % till 90 % (icke-kondenserande)



Lufttrycksintervall vid transport, lagring och drift: 700 hPa till 1060 hPa



Denna märkning indikerar att denna enhet inte behöver steriliseras.



CE-märkningen på enheten bekräftar överensstämmelse med de europeiska kraven i förordningen om medicintekniska produkter (2017/745/EU, direktiv om medicintekniska produkter (MDR)).
Denna enhet uppfyller kraven i följande ytterligare EU-direktiv:

- 2011/65/EU + 2015/863/EU RoHS-direktivet
- 2012/19/EU WEEE-direktivet
- 2014/53/EU RED-direktivet

Fullständiga försäkringar om överensstämmelse finns tillgängliga på internet på www.humanteknik.com i serviceavdelningen.

Alla allvarliga incidenter måste rapporteras till tillverkaren och den behöriga lokala myndigheten!

Tekniska ändringar förbehålls.

Humantechnik Service-Partner

**D**

Germany

Humantechnik GmbH
Im Wörth 25
D-79576 Weil am Rhein

Tel.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
Fax: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-70
E-mail: info@humantechnik.com

**CH**

Switzerland

Humantechnik GHL AG
Rastatterstrasse 9
CH-4057 Basel

Tel.: +41 (0) 61/ 6 93 22 60
Fax: +41 (0) 61/ 6 93 22 61
E-mail: info@humantechnik.com

**F/B**France
Belgium

SMS Audio Electronique Sàrl
1 rue des Entrepreneurs
F-68300 Saint-Louis

Tel.: +33 (0) 3 89/ 44 14 00
Fax: +33 (0) 3 89/ 44 62 13
E-mail: sms@audiofr.com

**NL**

Netherlands

Hoorexpert BV
Gildenstraat 30
NL-4143 HS Leerdam

Tel.: +31 (0) 3 45/ 63 23 93
Fax: +31 (0) 3 45/ 63 29 19
E-mail: info@hoorexpert.nl

**GB**

Great Britain

Sarabec Ltd
15 High Force Road
GB-Middlesbrough TS2 1RH

Tel.: +44 (0) 16 42/ 24 77 89
Fax: +44 (0) 16 42/ 23 08 27
E-mail: enquiries@sarabec.co.uk

**FI**

Finland

Humantechnik Finland Oy
Kuohunraitti 53
FI-41930 Kuohu

Tel.: +35 8405 7057 88
E-mail: paakkunainen@humantechnik.com

**For other service-partners
in Europe please contact:**

Humantechnik Germany



Tel.: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-0
Fax: +49 (0) 76 21/ 9 56 89-70
Internet: www.humantechnik.com
E-mail: info@humantechnik.com

**HUMANTECHNIK**

RM265708 - v2026-04-09
A-2657-W